




Domus 1

Superficie Especial de Manejo de Presión

El Domus 1 es la SEMP Apex recomendada tanto para pacientes con riesgo bajo de aparición de úlceras por presión (UPP), como para el tratamiento de UPPs hasta grado I.

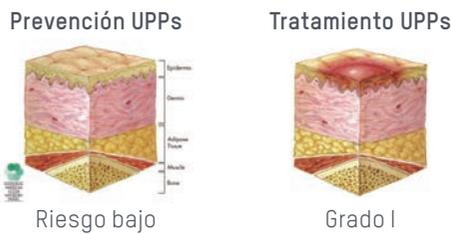

El Domus 1 cuenta con una terapia de presión alternante (las burbujas se inflan y desinflan redistribuyendo la presión en ciclos de 9,6 minutos). Es un sobrecolchón que necesita de un colchón extra en la base.

Eficacia terapéutica:



Alivio de Presión: Básico. Gracias a sus 130 burbujas de 6,4 cm de altura.



Regulador en función del peso del paciente: Desde 40 a 100 kg.



PVC sanitario: Minimiza el riesgo de alergias y aporta mayor durabilidad.

Descripción de Producto	Referencia
Domus 1	0101017N
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) y peso	30,3 x 17 x 20 cm. 4,15 kg
Especificaciones del colchón	
Dimensiones (largo x ancho x alto) y peso	198 x 86 x 6,4 cm . 2 kg
Burbujas	130 burbujas de PVC sanitario
Solapas de ajuste al somier	1 metro de solapas
Certificados	Retardante al fuego CA 117
Garantía	6 meses
Especificaciones del compresor	
Dimensiones (largo x ancho x alto) y peso	23,7 x 11,2 x 9,5 cm. 1,4 kg
Voltaje	AC 230V, 50 Hz
Máxima salida de aire	4 litros/minuto
Ajuste de rango de presión	Sí, según peso paciente (40-100 kg)
Duración del ciclo alternante	9,6 minutos
Terapia	Alternante
Nivel sonoro	36 dBA
Botón encendido y apagado. Colgadores	Sí
Carcasa	ABS retardante al fuego
Certificados	Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21
Garantía	2 años

APEX
Wellell Group

APEX MEDICAL, S.L.
c/ Elcano, 9, 6ª planta
48008 Bilbao (Vizcaya)
Tel: 94.470.64.08
info@apexmedical.es
www.apexmedicalcorp.com